

PRIDE
MOBILITY®

Q
QUANTUM®
#1 FOR REHAB POWER

GAMME
EDGE®

QUANTUM®
EDGE® 4

NOTRE EDGE® LE PLUS VÉLOCE SUR TERRAIN
ACCIDENTÉ ET AVEC UNE CONDUITE
ENCORE PLUS PRÉCISE !



CLASSIFICATION : FREP-B
FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE MULTI-POSITIONS

EDGE® 4



*roues KNOBBY disponibles

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- 4 suspensions indépendantes SRS (Smooth Ride Suspension),
- 2 moteurs 4 pôles,
- Base 6 roues centrales,
- Adjonction iLevel® disponible, avec une élévation d'assise jusqu'à 30 cm, utilisable à une vitesse de marche (jusqu'à 7,2 km/h),
- Éclairage LED et port USB inclus de série,
- Large choix de coloris pour une personnalisation à votre image.

FRANCHISSEMENT



SOUPLESSE



ROUES MOTRICES CENTRALES

Innovation : 6 roues positionnées au centre de l'encombrement total ce qui permet une maniabilité et des performances extérieures inégalées !



MOBILE



COMPACT



Électronique Q Logic 3

ZOOM

ZOOM +



4 suspensions indépendantes

SCAN pour +
d'infos sur la
TRU Balance



TRU BALANCE® 3 ET 4

DOSSIER INCLINABLE
BIO
MECANIQUE
165°



BASCULE D'ASSISE ARRIERE JUSQU'À 50°

POINTS FORTS

- Options de proclive : 10°, 20° et 30°,
- Grande amplitude d'assise (de 30 à 60 cm) et ajustements précis,
- Assise anti-transpirante CoolCore et ergonomique,
- Conçu pour le lift iLevel, utilisation fonctionnelle améliorée,
- Transfert plus serein : repose-jambes à descente au sol qui s'abaisse pour libérer l'espace et faciliter la sortie du fauteuil,
- Confort durable : bascule arrière de 50° et dossier biomécanique inclinable de 85° à 165° pour soulager les pressions, éviter le glissement et accompagner le positionnement.



TRU BALANCE® 3 & 4 EN VIDÉO :

SCAN pour voir
la vidéo en
Full Tilt



SCAN pour voir
la vidéo en
Full Recline



JUSQU'À 8 MÉMOIRES DE POSITIONS



CAMERA DE REcul

EN OPTION

POINTS FORTS

- 2 modes : automatique ou continu
- Montage sur flexible ou au manipulateur
- Manœuvres plus sereines et sans stress
- Confort postural préservé
- Utilisable de jour comme de nuit
- Champ de vision augmenté

Micro-caméra
grand angle 170°

Ecran LCD 3,5"



DÉPLACEZ VOUS EN HAUTEUR
7 km/h



30 cm

POINTS FORTS

- Une élévation fluide.
- Rapide et sécurisée.
- Intégrée naturellement dans la vie de tous les jours.
- Jusqu'à 30 cm d'élévation d'assise électrique à vitesse de marche (7,2 km/h).
- La technologie brevetée Extra Stability Technology® d'iLevel® assure la sécurité lors des déplacements, des atteintes d'objets et de nombreuses autres activités de la vie quotidienne.

SCAN pour voir
le iLevel en
vidéo



SCAN pour +
d'infos sur le
iLevel




« CUISINER EST TELLEMENT PLUS SIMPLE MAINTENANT QUE JE PEUX ATTEINDRE LES OBJETS. JE N'IMAGINE PAS MA VIE SANS iLEVEL® » STÉPHANIE



ILEVEL® N'EST PAS SEULEMENT UN FAUTEUIL QUI S'ÉLÈVE : C'EST LA PROMESSE D'UN QUOTIDIEN PLUS ACCESSIBLE, PLUS SÛR ET PLUS RICHE EN INTERACTIONS.

Stealth Products® COUSSINS

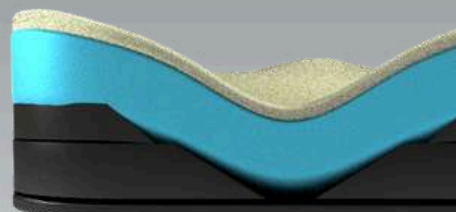



LES AVANTAGES

Coolcore® est une technologie textile idéale pour garder une sensation de fraîcheur lors d'efforts ou par temps chaud. C'est une solution durable et sans additifs chimiques pour réguler le microclimat au contact du corps.

SCAN pour + d'infos sur Coolcore



SCAN pour des détails sur les coussins



COUSSINS - PAP - B

Stealth Products® propose une large gamme de coussins, du plus technique ou plus adapté selon les morphologies et les besoins.



HOUSES DISPONIBLES



POLYURETHANE

Protection incontinence

AIR FLOW MESH

COOLCORE

Housse Coolcore de série

COUSSINS DE SÉRIE



Capacité : 226 kg
Poids du coussin : 1,59 kg
Largeur : de 35 cm à 82 cm
Protection incontinence :
 Oui

Capacité : 204 kg
Poids du coussin : 1,80 kg
Largeur : de 35 cm à 61 cm

Q-LOGIC 3

POINTS FORTS

- Une ergonomie personnalisable,
- Une interface connectée qui ouvre l'accès à l'environnement,
- Un système fiable et intuitif,
- Un outil flexible, paramétrable en fonction des capacités de l'utilisateur et de leur évolution,
- Bluetooth intégré.



Q-LOGIC 3



Ecran additionnel
Q-Logic 3



Joystick Q-Logic 3

SCAN pour +
d'infos sur
Q-Logic 3



Clavier i Access



Commande tierce personne



COMMANDES ALTERNATIVES

Le Edge 4 propose de nombreuses commandes alternatives qui s'adaptent aux capacités des mouvements et aux besoins des utilisateurs. Qu'ils soient capables d'actionner un joystick Q-Logic 3 ou uniquement un contacteur, le Edge 4 vous donne la possibilité d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités quel qu'en soit la commande.

Q-LOGIC 3

SCAN pour +
d'infos sur
les commandes
alternatives



**JOYSTICK
Q-LOGIC 3**



**JOYSTICK
Q-LOGIC 3E**



**ECRAN
Q-LOGIC 3**

EMBOUTS DE JOYSTICK*



BARRE



**CUPELE
MENTON**



POIGNEE T



**BALLE
MOUSSE**

* de série

COMMANDES MOVIS®



MICRO



ALL-ROUND



**COMMANDE
AU PIED**

COMMANDES AVEC IDRIVE®



HEAD ARRAY



TRAY ARRAY



SCAN pour
+ d'infos sur iDrive



Retrouvez l'ensemble des commandes alternatives disponibles sur le bon de commande.



Spécificités techniques

ROUES MOTRICES	14" pneumatiques
ROUES AVANT ET ARRIERE	7" bandages
VITESSE MAXIMUM¹	Jusqu'à 10 km/h Jusqu'à 7,2 km/h (avec iLevel activé)
AUTONOMIE	Jusqu'à 29 km
GARDE AU SOL	7,3 cm
RAYON DE GIRATION²	55,88 cm
LONGUEUR²	97 cm
LARGEUR DE LA BASE	61 cm
TAILLES D'ASSISE	
TRU Balance® 4 Anterior Tilt⁵	Largeur : 41 - 56 cm Profondeur : 35 - 56 cm
TRU Balance® 3 Power Tilt	Largeur : 30 - 60 cm Profondeur : 30 - 60 cm
TRU Balance® 3 Tilt and iLevel®	Largeur : 30 - 56 cm Profondeur : 30 - 56 cm
HAUTEUR SOL/PLAQUE D'ASSISE	
TRU Balance® 4⁵	46,3 - 54 cm
TRU Balance® 3⁵	44,5 - 49,5cm
BATTERIES³	2 x 82 Ah
POIDS DES BATTERIES⁷	21,31 kg chacune
ÉLECTRONIQUES DISPONIBLES⁶	Q-Logic lite Q-Logic 3
CHARGEUR	8 Amp Externe
MOTEURS	2 x 4 pôles
POIDS MAX UTILISATEUR⁴	136 kg
POIDS DE LA BASE	170 kg (sans batteries)

- 1) La vitesse peut varier selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge, l'état des batteries et la pression des pneus.
 2) Sans palettes
 3) La capacité des batteries peut varier selon l'utilisation et/ou l'ajout de fonctions électriques.
 4) La capacité maximum du poids de l'utilisateur est définie en fonction de l'assise choisie.
 5) Les mesures ont été prises avec une assise en 46x46 cm avec +/- 3mm, une assise fixe, des roues à bandages et un poids utilisateur de 136 kg (il faut rajouter 10mm avec des roues pneumatiques). Contactez votre service client pour avoir des détails. Les mesures indiquées sont prises dans la position la plus basse, et n'incluent pas le système d'élévation électrique de l'assise.
 6) Tous les fauteuils Quantum Rehab® peuvent être commandés avec des commandes spéciales.
 7) Le poids des batteries peut varier de +/- 1.4 kg d'après les données fournisseur.

*de série

Nouveaux coloris



INFERNO RED



ROYALE BLUE



BERMUDA BLUE



COSMIC PURPLE



FOREST GREEN



GHOST GRAY



ICE PINK



STEEL BLUE



BLACK CAMO
-BIENTÔT-



Accessoires

Parmi les accessoires disponibles :



Support pour téléphone



Barre de transfert



Caméra de recul



Bidon système d'hydratation



Crochet pour sac



Boîte à gants sur accouoir



Ceinture enrouleur*



Porte gobelet*



Chargeur USB*